

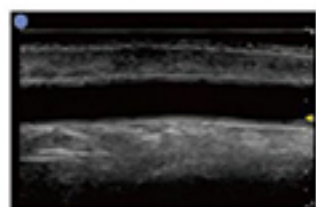


超高频超声图像临床应用


显微镜级的高分辨率 / 动态实时的二维图像 / 灵敏丰富的浅表血流 / 简捷无创的临床操作

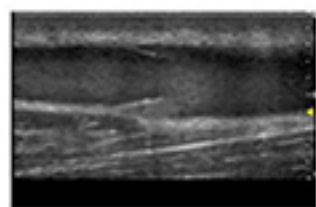



桡动脉

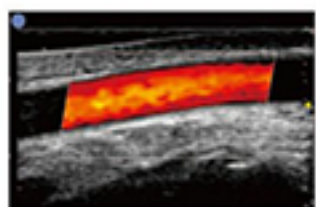


静脉

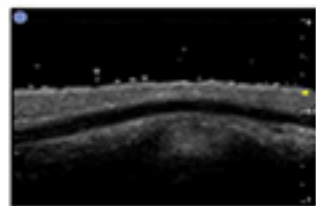



指动脉

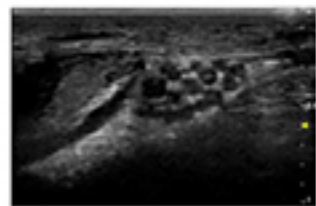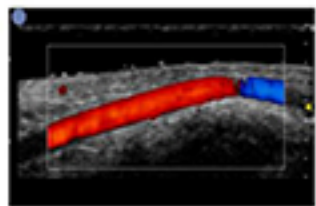


正中神经

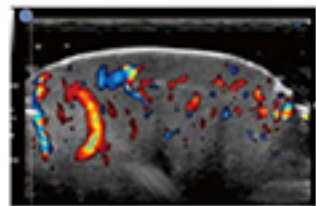

女 10月 右肩部血管瘤

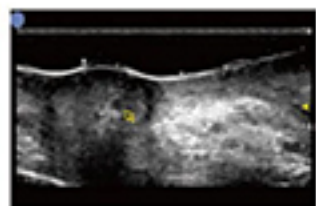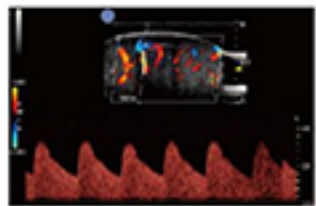

女 71岁 面部基底细胞癌

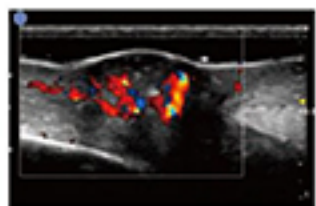

C5H 超高频彩色
多普勒超声系统



广州索诺星科技有限公司

生产基地: 广东省珠海市香洲区吉大水湾路31号
总部地址: 广州开发区科学城康乐路27号C栋505
电话: 020-32382095 传真: 020-62614030
www.sonostar.cn E-mail: sales@sonostar.net

业务联系信息:



皮肤 | 新生儿 | 手外 | 烧伤

皮肤 | 新生儿 | 手外 | 烧伤

基于全球领先的CMUT半导体超声技术,集成近60项发明专利,公司历经数年潜心研制,推出了C5H超高频超声影像系统。该系统微米级的成像分辨率,为临床医生观察表皮组织,新生儿血管等打开了全新的高清视窗。更精准的扫查,更细节的展示,引领了超声在皮肤,整形外科,手外,神经,新生儿,烧伤等多个新兴的临床应用,广泛而极大地惠益了中国的医患用户。

小巧便携 4.9公斤机身

快速存图 双USB接口

细节呈现 15英寸高清大屏

坚固耐用 高强度镁铝合金

优雅简便 镭雕透光键盘

实时切换 双探头接口

产品参数

图像技术

频率范围	22-38MHz
探头基元数	256
B模式	●
彩色血流模式	●
多普勒模式	●
局部放大	●
伪彩	9种可选

图像测量

距离/角度	●
周长/面积	●
体积	●
血流速度	●

图文数据管理

单幅/电影图像	●
海量存储	●
检查报告	●

外围外设

探头插座	2
USB/HDMI接口	●
WiFi连接	●
选配专用台车	●
外接打印机	图文/视频打印机
防盗锁插孔	●
内置电池	●
电源	100-240V 50/60Hz

半导体CMUT专利技术
优异均匀一致性

电容式微机电传感器
高频高分辨率

256基元宽视窗
所见即所得