



品牌产品 品质可靠
售后保障 放心购买

服务热线：4000-198-196



广州索诺星信息科技有限公司

地址:广州市黄埔区科学城崖石路27号C栋5楼
电话: 020-32382095 传真: 020-62614030
www.sonostar.cn Mail: sales@sonostar.net

业务联系信息:



C9

彩色多普勒超声诊断系统
便携式彩超/B超

 **SonoStar** 索诺星


彩色多普勒超声诊断系统便携式彩超/B超

本机为我司新一代便携彩超产品，采用了先进的PC平台，拥有强大的处理能力，优异的图像性能，同时融合了新的临床超声检查的解决方案，集小巧轻便、全面的功能与轻巧流畅、特有的U型设计于一身，提供大众新选择。

先进的成像技术

- PHI脉冲反相组织谐波成像+频率复合技术
保证良好穿透力的同时获得更加细腻的二维图像
- 空间复合成像技术
通过多个角度图像复合减弱单一图像伪像，提高信噪比
- 斑点噪声抑制技术
消除二维图像斑点噪声，显著提高图像信噪比
- 多种成像模式
B、C、PW、CW、BCD三功、大角度偏转成像、实时宽景成像、梯形成像（仅支持线阵）、解剖M型、彩色M型成像、组织多普勒成像
- 彩色多普勒增强技术
有效抑制彩色血液闪烁噪声，提高血流分辨率和灵敏度
- 多波束并行处理技术
四倍波束并行处理，保证图像良好分辨率的同时，提高图像刷新帧率
- 血管内中膜自动测量
操作简单，提高工作效率
- 一键优化
一键自动调节各种模式下成像参数，使图像达到最优

临床图像

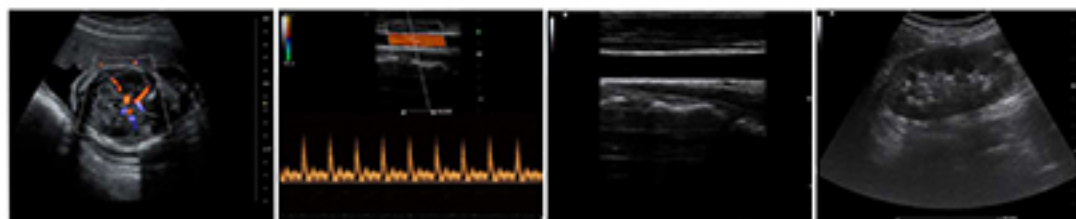

丰富的探头群

支持凸阵、线阵、腔内、相控阵、小微凸等探头



人性化设计



90度自由旋转视角



小巧轻便，方便随时移动和使用



内置锂电池



背光、防水、防腐蚀
控制面板



15英寸LCD高清显示屏



两个探头接口



丰富的储存接口

