

SS-6 CC2019/B0



争创世界一流超声品牌



大屏幕
图像清晰



品牌产品 品质可靠
售后保障 放心购买

服务热线：4000-198-196



广州索诺星信息科技有限公司

总部地址：广州开发区科学城谱石路27号C栋504
电话Tel: 020-32382095 传真Fax: 020-62614030
网址: www.sonostar.cn Mail: sales@sonostar.net


业务联系信息：

SS-6

全数字便携式超声诊断仪

- 品质优良、价格实惠
- B, B/B, 4B, B+M, M多种显示模式
- 12寸彩色液晶显示屏，直接伪彩显示
- 全数字成像高清晰图像
- 电影回放和图像存储功能

- 小巧轻便，便于携带
- 双探头接口
- 多变频探头
- USB, VGA, BNC视频输出接口
- 背光硅胶键盘

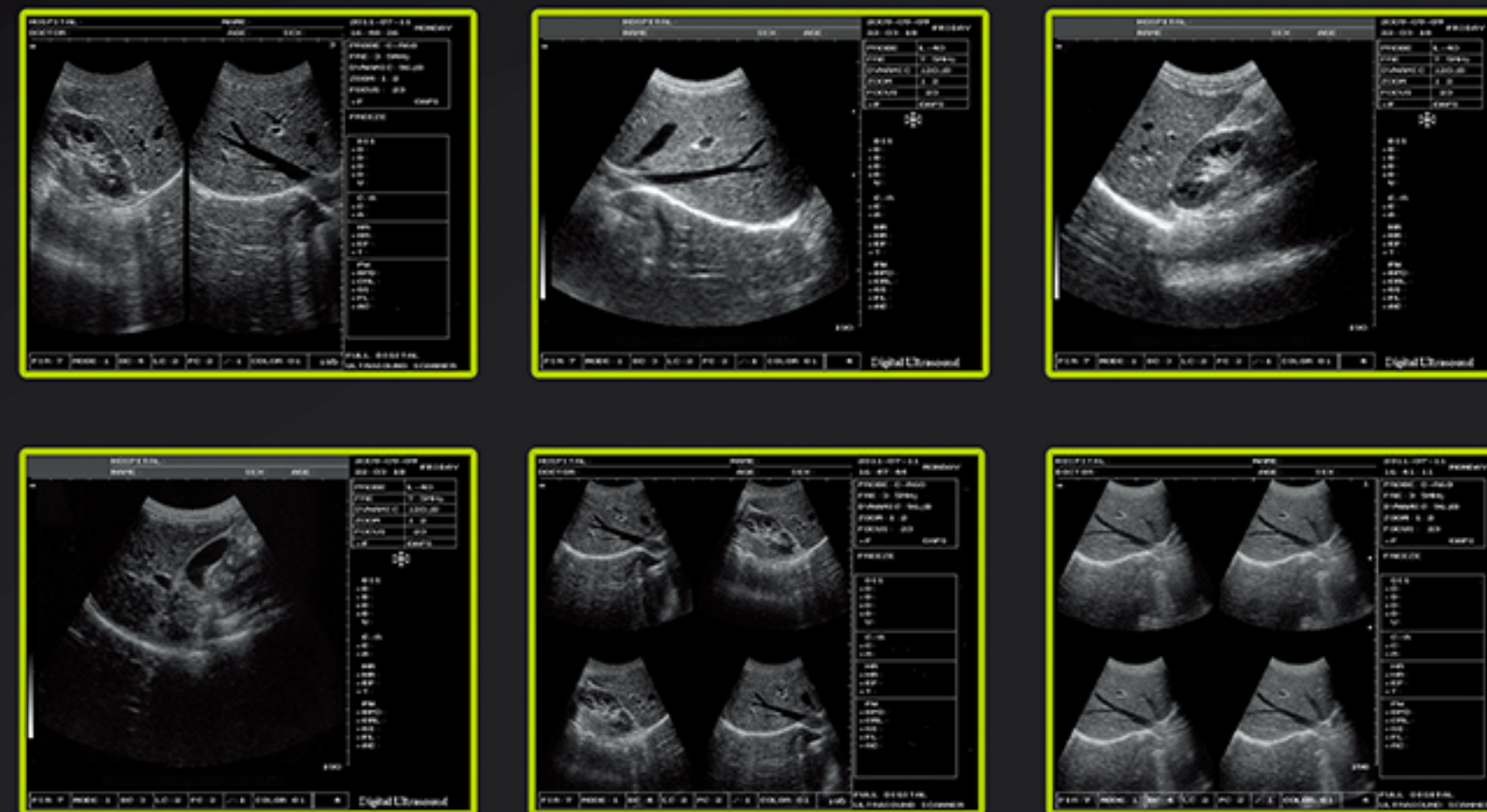

技术指标:

- 扫描方式: 电子阵列扫描。
- 探头: 3.5MHz电子凸阵。
- 显示模式: B型、B/B型、4B型、B+M型、M型。
- 显示尺寸: 12吋彩色液晶显示器(可直接显示伪彩)。
- 图像倍率: B型 $\times 0.8$ 、 $\times 1.0$ 、 $\times 1.2$ 、 $\times 1.5$ 、 $\times 1.8$ 、 $\times 2.0$ ， $\times 1.8$ 、 $\times 2.0$ 时，通过深度移动键可移动显示。
- M型速度: M型扫描有8种速度可选。
- 中英文转换: 界面可进行中英文转换。
- 局部放大: 局部 $\times 2.0$ 倍率放大。

- 动态范围: 64~96dB可调。
- 图像灰阶: 256级。
- 变频: 具有多种变频接收。
- 聚焦: 一、二、三、四多段动态电子聚焦可选。
- 测量: 距离、周长、面积、心率、孕周(BPD、GS、CRL、FL、AC)及预产期、胎重等。
- 注释功能: 姓名、病历编号、性别、年龄、实时时钟; 16种带有探头位置的体位标记; 全屏幕字符注释等。
- 增益控制: 总增益、近场、远场8段TGC、总增益连续可调。
- 图像极性: 左/右翻转、黑/白翻转、上下翻转。
- 永久存储: 128幅。
- 图像回放: 256幅。
- 前处理: 可变孔径、动态变迹、动态滤波等。
- 后处理: 数字时空滤波、勾边增强、 γ 校正、伪彩处理、帧相关、点线相关、线性内插等。
- 输出接口: 标准PAL、SVGA制视频输出, USB接口。
- 扩展功能: 可配接多种探头。

标准配置:

- 主机 1台
- 3.5MHz多变频凸阵探头(可改选用其他型号的探头) 1只

选配:

- 线阵、微凸阵、腔内、直肠等各种探头
- 小推车



STORE

USB

