



争创世界一流超声品牌!



T3 推车/便携/掌上 三合一彩超

- 触摸屏14寸大屏幕
- 图像清晰细腻
- 功能强大，内置报告工作站
- 探头无线连接，操作更加方便
- 无缝隙防水硅胶超声键盘
- 价格低廉，性价比极高
- 可根据需要灵活切换为推车式、便携式、掌上式三种不同产品形式的彩超，以及也可作为笔记本电脑使用



品牌产品 品质可靠
售后保障 放心购买


服务热线：4000-198-196



广州索诺星信息科技有限公司

地址:广州市黄埔区科学城崖鹰石路27号C栋5楼
电话: 020-32382095 传真: 020-62614030
www.sonostar.cn Mail: sales@sonostar.net

业务联系信息:

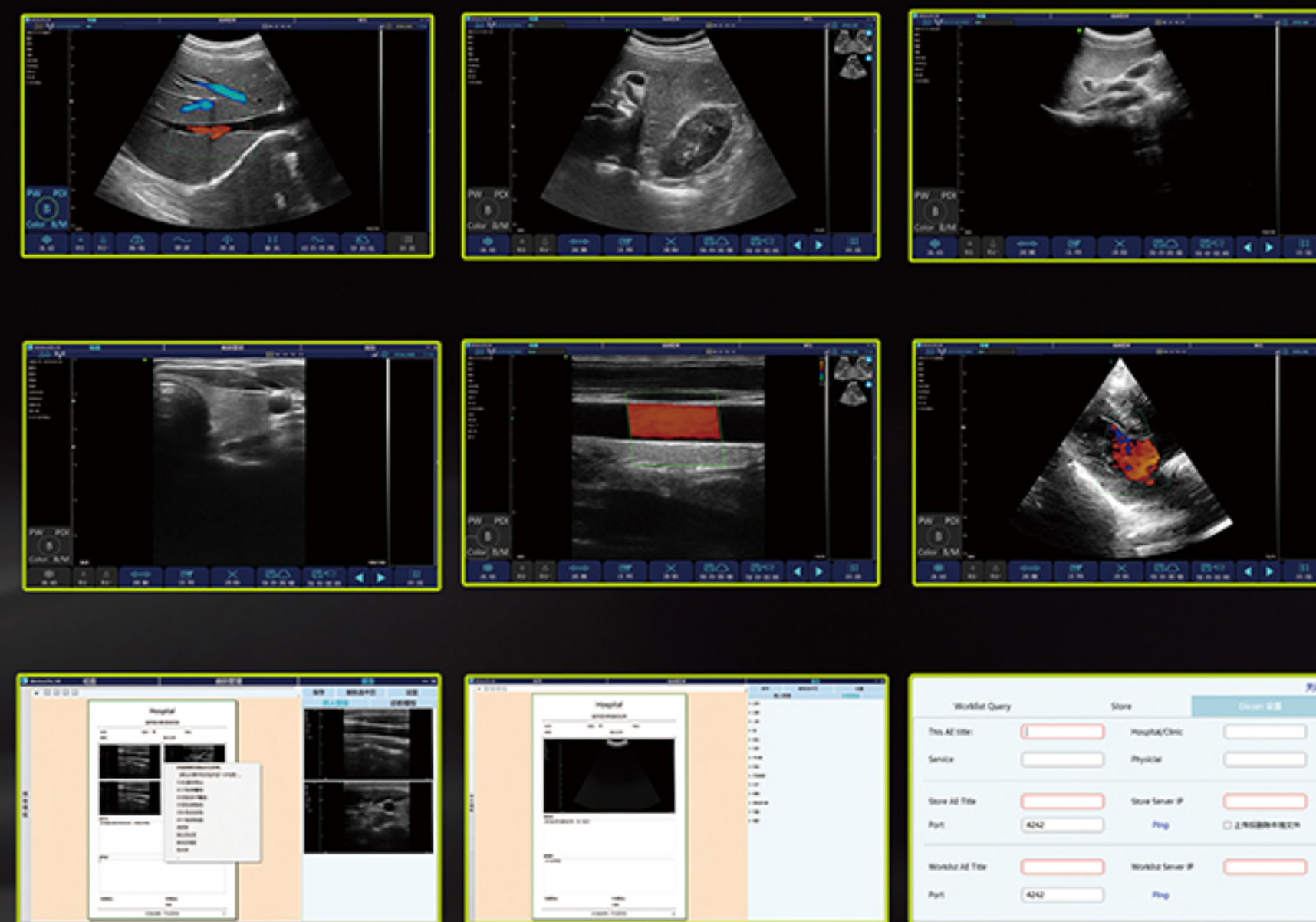

超声键盘



超声探头

标准配置:

- 平板/笔记本二合一电脑 1台
- 硅胶防水超声键盘 1个

选配:

推车, 各种类型探头, 探头背包或铝箱, 探头无线充电板或充电宝, 探头穿刺架, 远程会诊插件软件

技术指标:

- 显示模式: B、B/M、Color、PW、PDI, 部分探头带2B模式
- 图像调节: 扫查及显示深度、总增益、分段增益TGC、动态范围、焦点、谐波、降噪、彩色多普勒WF、彩色多普勒PRF、PW基线、PW采样容积、PW采样角度、图像上下和左右翻转
- 穿刺辅助功能: 平面内穿刺引导线功能, 平面外穿刺引导与血管定位功能
- 探头电池续航时间: 1~3小时, 且可随时无线充电无限延长工作时间(部分探头也可一边工作一边连线充电)
- 测量功能: 距离、面积、周长、心率、产科等
- 电影回放: 手动和自动回放, 可设置回放帧数为100/200/500/1000
- 图像保存: JPG, avi, DICOM多种格式
- 探头与主机连接方式: 内置wifi无线连接
- 无线连接Wifi类型: 802.11n/2.4G/5G双频450Mbps
- 图像帧频: 20f/s
- 主机操作系统: Windows
- 病人数据保存与管理: 可实现病人信息保存, 进行图像单张和视频保存, 以及保存诊断报告
- 图像联网传输: DICOM和WorkList对接与传输功能
- 可选配探头: 3.5/5.0MHz凸阵, 7.5/10MHz线阵, 10/14MHz线阵, 超宽线阵, 微凸, 相控阵, 腔内, 直肠双平面, 凸阵+线阵双头, 凸阵+腔内双头, 凸阵/线阵/相控阵三合一
- 平板/笔记本电脑主机屏幕尺寸: 14寸
- 推车尺寸: 升降高度770~1070mm, 键盘台面440*265mm, 打印机台面480*480mm
- 包装尺寸: 推车和探头690*555*235mm, 平板电脑385*240*60mm
- 重量: 不含推车净重2Kg毛重3Kg, 加上推车则净重共17kg毛重共18kg