



无线探头式系列兽用测孕B超

Wireless Probe Type Ultrasound Scanner Series for Animal Pregnancy



VProbe-C凸阵经直肠
适用于牛马大胎



VProbe-L线阵经直肠
适用于牛马小胎



VProbe-N
适用于大羊用



UProbe-1
适用于猪羊



UProbe-3C
适用于猪羊

在畜牧业的应用：

- 监测卵泡发育和排卵为何时配种、提高配种率提供可靠的科学依据
- B超早孕监测最早可及时发现空怀，以便尽早作相应处理
- 妊娠期监测可及时发现死胎、流产，胚胎吸收等，同时可估测怀仔数目
- 产期监测可判断胎儿活力以及胎儿、胎衣是否排尽
- 产后监测子宫复原状况，诊断子宫内膜炎、子宫蓄脓、积液等繁殖障碍病

及时判断
减少空怀

产品配置

标配：探头式主机一个，充电线一条


选配：安卓平板/手机、平板背袋

Professional Create Value



技术指标

- 扫描方式：扇扫，电子阵列扫描
- 探头频率：扇扫/凸阵3.5/5.0MHz，线阵7.5/10MHz
- 扫描深度：凸阵90/160/220/305mm，
线阵20/40/60/100mm
- 声头半径/宽度：凸阵R60，线阵L64
- 显示模式：B、B/M
- 图像调节：增益、焦点、反相脉冲谐波、降噪
- 电池工作时间：3-8小时
- 充电方式：USB充电
- 测量功能：距离、面积、周长、心率、产科
- 电影回放：手动和自动回放，可设置回放帧数为
100/200/500/1000
- 图像保存：jpg, avi, DICOM多种格式
- 探头与主机连接方式：wifi无线连接
- Wifi类型：802.11n/2.4G/5G双频450Mbps
- 图像帧频：20f/s
- 软件支持系统：安卓Android
- 尺寸：长条直肠凸阵/线阵探头长度80cm
- 重量：长条直肠600g、小直肠/凸阵205g、扇扫150g

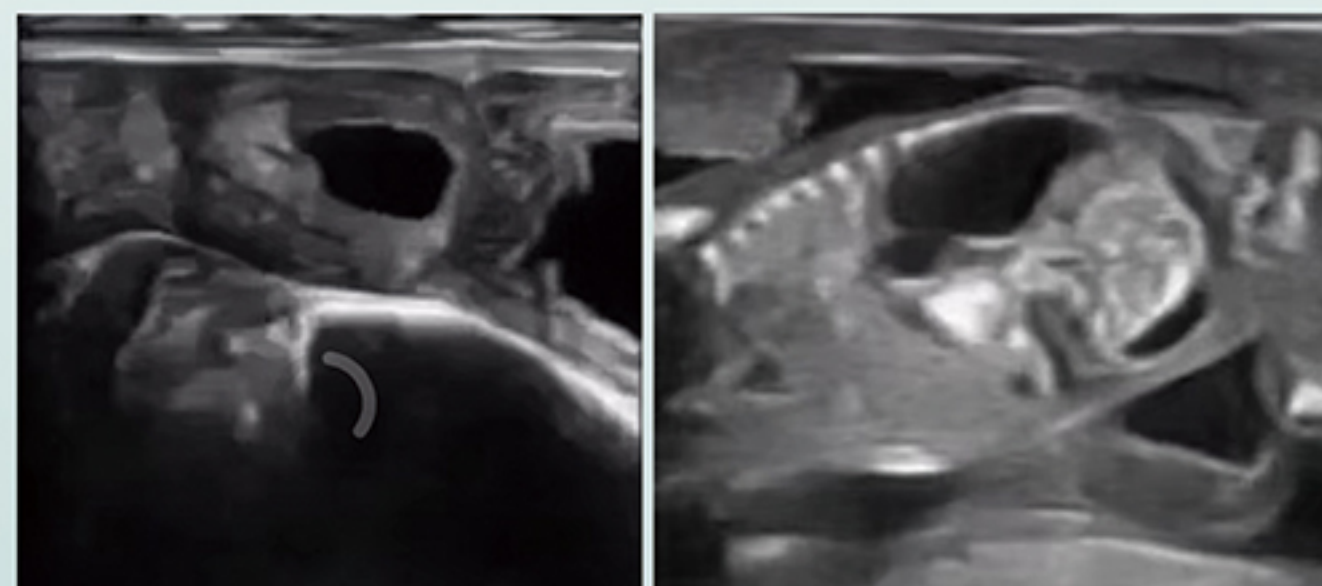

空怀(未孕)图像

怀孕21天图像

怀孕25天图像

怀孕45天图像

充满尿液的膀胱图像